




Die ERWEKA

DT light Serie

Manuelles Dissolution Testen, einfach und kompakt

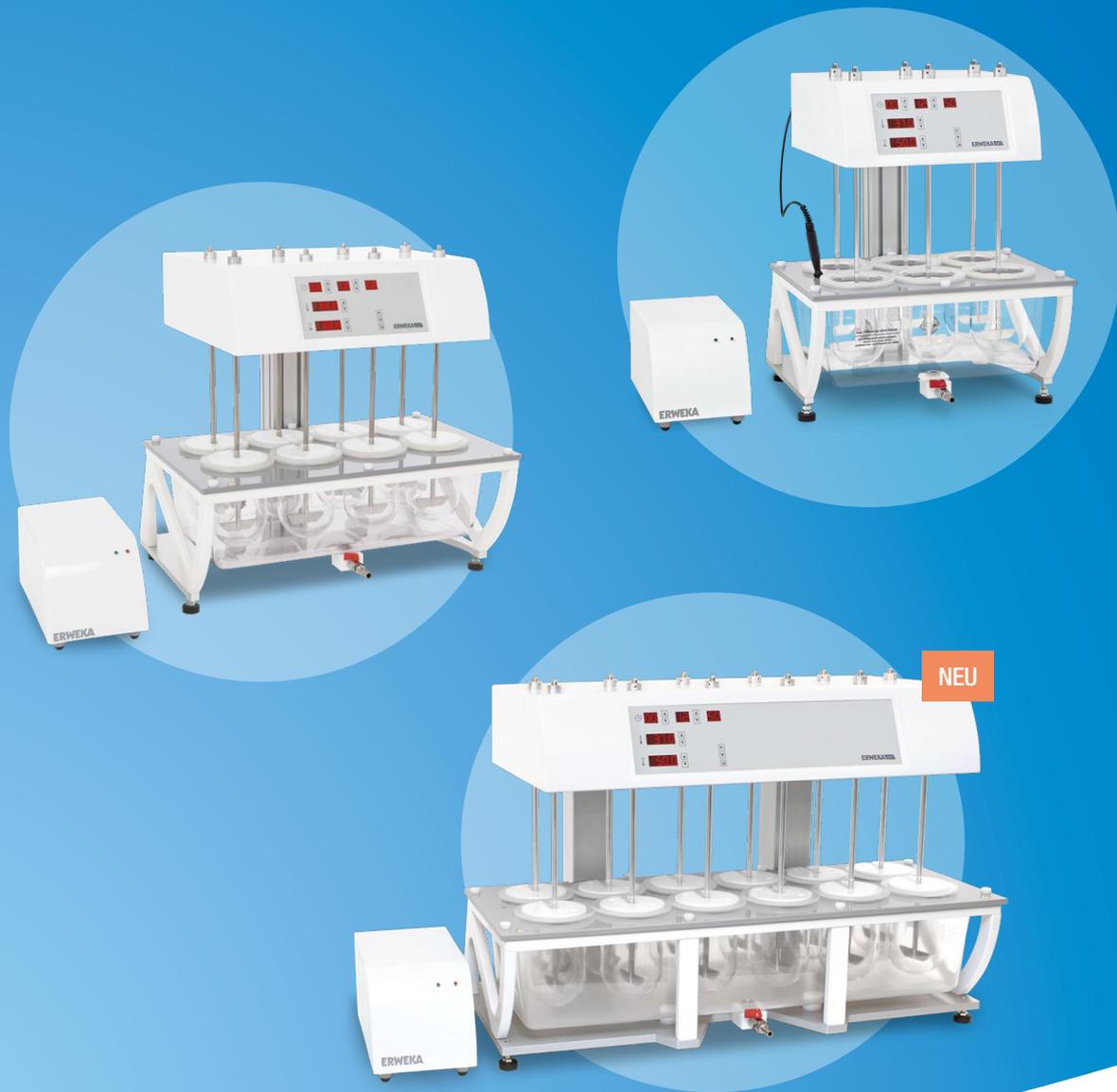

Manuelles Dissolution Testen, einfach und kompakt

DT light Serie

Solide ausgestattet, kompakt und in bewährter ERWEKA-Qualität: Die manuellen Dissolutionstester aus der ERWEKA DT light Serie.

Durchdacht konfiguriert testen die ERWEKA light Geräte in der Standardversion nach USP-Methode 2 (Paddle) und sind dank ERWEKA-Zubehör leicht auf Methode 1, 5 und 6 erweiterbar. Die sechs, acht oder zwölf Teststationen sind mit einem festen Antriebskopf versehen, der einen einfachen Zugriff auf die 1000 ml-Prüfbehälter zur manuellen Probenahme ermöglicht.

Zur Grundausstattung gehören ebenso die Abdeckungen zur Reduzierung der Verdunstung, die Zentrierringe für die Stäbe sowie die Distanzbälle zur Einstellung der Paddle-Höhe. Kompakte Einstiegsgeräte zum besten Preis.

Highlights

- 100 % USP/EP/JP konform
- Platzsparende, kompakte Bauweise
- Leichter Vesselzugang durch den High-Head-Modus
- Optional erweiterbar auf Methode 1 (Basket), 5 (Paddle over Disk) und 6 (Rotating Cylinder)
- Leichte Reinigung des Wasserbades und des Stellplatzes
- Externe Durchflusshheizung zur Reduzierung von Vibrationen und für ein konstantes Temperaturniveau
- Einfache Bedienweise dank Symboltasten mit LED-Display zum Ablesen der Temperatur, RPM und Laufzeit
- Anpassbare Halter für die USP-Probenentnahme-Punkte

Technische Daten

USP Methode 1 (Basket), 2 (Paddle), 5 (Paddle over Disk) und 6 (Rotation Cylinder) mit 6, 8 oder 12 Teststationen – inklusive USP Methode 2

100 % USP / EP / JP konform

Erfüllt alle Vorgaben der FDA „Mechanical Calibration“

USB-A Druckeranschluss (für ausgewählte Drucker)

USB-B Anschluss für Firmware Updates

RS 232 Anschluss zur Kontrolle der Heizung

Externer PT 100 Temperatursensor

Rotationsgeschwindigkeit 20 - 220 rpm \pm 1 rpm

Heizleistung: 30 - 50 °C (\pm 0,2 °C)



LED-Display und Symboltasten zur einfachen Steuerung



Verdunstungsschutz für Prüfbehälter inklusive

DT 126 light

Spezifikationen

- High-Head Gerät mit 6 Teststationen
- Maße (Breite / Tiefe / Höhe):
510 mm / 450 mm / 660 mm
- Gewicht: 30 kg



DT 128 light


Spezifikationen

- High-Head Gerät mit 8 Teststationen
- Maße (Breite / Tiefe / Höhe):
642 mm / 482 mm / 680 mm
- Gewicht: 38 kg

DT 1212 light

Spezifikationen

- High-Head Gerät mit 12 Teststationen
- Maße (Breite / Tiefe / Höhe):
932 mm / 444 mm / 656 mm
- Gewicht: 60 kg

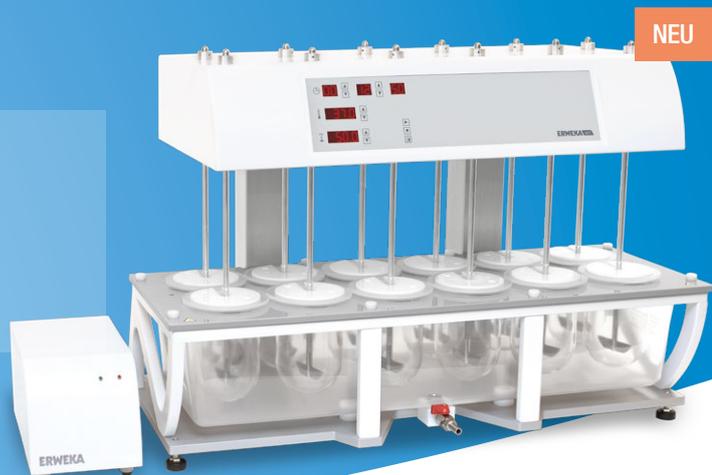



Kontakt

Sind Sie neugierig geworden und möchten mehr herausfinden? Besuchen Sie unsere Webseite und laden Sie sich unsere Produktbroschüren herunter, schauen Sie sich Videos von unseren Testgeräten an oder finden Sie Ihren ERWEKA Händler.



E-Mail: sales@erweka.com
Tel.: +49 6104 6903-0
Fax: +49 6104 6903-40



support@erweka.com



www.erweka.com



spareparts@erweka.com



www.facebook.com/erweka.gmbh

ERWEKA GmbH

Ottostr. 20-22
63150 Heusenstamm
Deutschland

E-Mail: sales@erweka.com
Telefon: +49 6104 6903-0
Fax: +49 6104 6903-40

Die Produktspezifikationen sind ohne Gewähr und können ohne vorherige Vorankündigung geändert werden. v.1.0.5.18

ERWEKA light